

Ambu® Man Advanced



Características Principales

- La última tecnología inalámbrica de Ambu
- Diseño robusto
- Escenarios Individuales programables
- Navegador basado en un módulo de gestión Ambu para control, documentación y monitorización
- Alta flexibilidad gracias al acceso independiente del sistema operativo y control
- Posibilidad de revisión individual en entrenamiento grupal (Hasta cuatro participantes)
- Acceso paralelo múltiple de varios dispositivos para visualización del rendimiento
- Visualización de un monitor realista de paciente con ECG de 12 derivaciones
- Programación personalizada de los posibles ritmos de ECG
- Reproduce sonidos respiratorios
- Entrenamiento de la gestión de las vías respiratorias
- Capacitación de técnicas de i.v. y i.o.

Ambu® Man Advanced

AmbuMan Advanced es el último maniquí de entrenamiento de Nueva Generación Ambu, diseñado para satisfacer todas las necesidades para el entrenamiento de Soporte Vital Avanzado (SVA)

El foco de los maniqués está en el algoritmo: Manejo de vías aéreas, simulación de ECG, desfibrilación y entrenamiento de técnicas de i.v. y i.o.

El núcleo es el AmbuMan, con la última tecnología Ambu wireless integrada. El módulo de navegación permite el control inalámbrico, la documentación y seguimiento del desempeño de los alumnos. El módulo de gestión es la interfaz central, donde se reúnen todos los datos e información: profundidad de compresión, posición correcta de la mano, volumen de ventilación, inflación de estómago.

Con AmbuMan Advanced puede crear escenarios personalizados y adaptarlos perfectamente a diferentes conceptos del curso. El AmbuMan Advanced es el maniquí de formación de y para profesionales.

Formación de escenarios personalizados

El AmbuMan Advanced ofrece nuevas posibilidades de implementación de conceptos de acuerdo a la demanda de los instructores y las actuales directrices del ERC / AHA de 2015. Su creatividad no tiene límites. La interfaz de usuario intuitiva permite la creación de escenarios personalizados fácil y rápidamente. Se pueden ajustar manualmente durante la formación, en función de la situación. Todos los parámetros de RCP y eventos manuales se documentan de forma inalámbrica y se incluye la información en la evaluación.

Nuevo nivel de debriefing

Evaluación individual de los participantes en la formación en grupo para formación. Cada participante recibe sus resultados personales.

Especificaciones


AmbuMan Advanced	Conectividad	✓	WLAN o LAN La tecnología inalámbrica de Ambu se basa en la última generación de "Intel WLAN Modules"
	Navegador basado en un módulo de gestión Ambu	✓	Control independiente del sistema operativo y basado en un navegador, escenarios programables, documentación individual de hasta 4 participantes, visualización paralela y control de hasta 6 maniqués, acceso múltiple paralelo de varios dispositivos para la visualización del rendimiento
	Fuente de alimentación	✓	Adaptador de CA (Corriente Alterna) Batería o PoE (opcional, no incluido en el embalaje)
Retoolimentación manual de la pantalla		✓	Extensible Volumen de ventilación, profundidad de compresión, posición de la mano, estómago
Manejo Vías aéreas		✓	Formación de la vía aérea: como las máscaras laríngeas, o el tubo traqueal. Ventilación de la bolsa- mascarilla y uso de cánula de Guedel. Las vías aéreas se abren cuando se realiza una correcta Hiperextensión.
Desfibrilación		✓	Equipado con dos electrodos (ápice y esternón) que pueden ser desfibrilados hasta 360 julios. Además se pueden usar desfibriladores manuales, semiautomáticos y automáticos, con palas.
Estimulación		✓	Posibilidad de realizar estimulación transcutánea
Simulación ECG		✓	Cumplir con las Directrices ERC 2015 El ECG es visualizado fisiológicamente correcto y detectado en consecuencia por un Desfibrilador 12-lead ECG display, ECG puede ser programado manual
Entrenamiento en técnicas de inyección			Formación de técnicas i.v. (Brazo) + i.o. (Pierna)



Carcasa transporte Ambuman Advanced



Accesorios incluidos

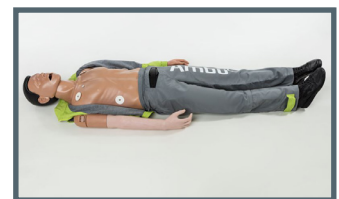

AmbuMan Advanced con 2 parches desfibrilación

Datos técnicos

Peso del torso con bolsa de transporte	25.1 kg
Peso del cuerpo completo	13.3 kg
Largo del cuerpo completo	165 cm

Especificaciones del pedido

Ref.	Descripción
A 284 407 000	AmbuMan Advanced Maniquí Cuerpo completo, incluye Brazo i.v y Pierna i.o, tecnología Ambu Wireless integrada, módulo de gestión y carcasa de transporte
A 284 417 000	AmbuMan Advanced Maniquí Cuerpo completo, tecnología Ambu Wireless integrada, módulo de gestión y carcasa de transporte
Accesorios	
234 000 077	Conjunto de pilas
284 000 520	Kit Conjunto entrenamiento técnicas de inyección i.o; 1 hueso, 5 parches de inyección, 5 pieles

Firma Ambu S.L.

C/ Alcalá 261-265, Edf. 2-3.º dcha.
28027 Madrid
Tel. +34 91 411 68 30
Fax +34 91 564 50 82
www.ambu.es