

## HOJA TÉCNICA

AmbuMan® Basic cumple con todas las directrices de Formación de RCP de SVB.


Ahora con la nueva iQF App, la formación se puede realizar con un alto nivel de precisión y rendimiento de la RCP para adultos.

### La RCP es la acción más importante cuando una persona sufre un paro cardíaco

Si no se aplican las técnicas adecuadas en los primeros cuatro minutos, el daño cerebral del paciente puede ser irreversible. Por esto la formación de RCP es vital.

### iQF, Training that Works for Life

La App iQF tiene información basada en datos y directrices de RCP relevantes. Es la combinación perfecta entre feedback rápido, técnica adecuada y diversión para los alumnos que hacen la formación.

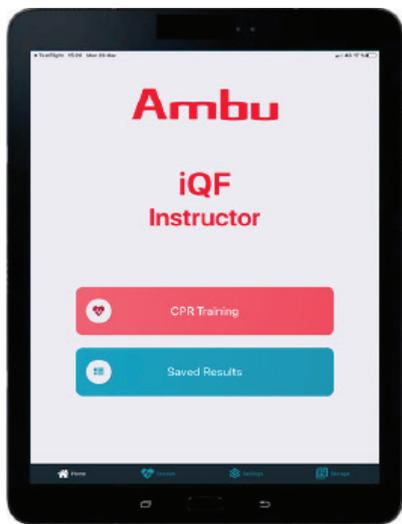

Ambu iQF Instructor

### Ventilación realista y Sistema Higiénico Único

El maniquí permite un entrenamiento óptimo de las compresiones torácicas en combinación con una ventilación realista.

El Sistema Higiénico Único evita la contaminación cruzada, lo que trae más seguridad tanto para el instructor como para el alumno.

La correcta profundidad de compresión y el volumen de ventilación requerido pueden ser monitorizados en el panel del maniquí.

Además permite la resistencia ventilatoria realista y la expiración a través de la boca y la nariz.

# AmbuMan® Basic iQF



## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Maniquí económico para formación de SVB, robusto y realista, con torso anatómico cerrado
- Visualización correcta de la profundidad de compresión
- Sistema Higiénico Único para boca a boca o boca-nariz
- Ascenso visible y realista del pecho durante la ventilación
- Entrenamiento con DEA

## TRAIN IQF, TRAIN FOR LIFE

Se puede visualizar la profundidad de la compresión y el correcto volumen de la ventilación cuando el maniquí está conectado en la Trainee iQF App. Se conecta por Bluetooth®.

# Ambu

## ESPECIFICACIONES

Peso del Torso	6 kg
Longitud	70 cm
Anchura	37 cm
Peso 4 x Torso y Bolso	30 kg
Volumen máx. Ventilación	1200 ml
Profundidad de compresión máx.	7 cm

## MATERIALES

Maniquí	ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno)
Cabeza	PVC, rígido
Piel del pecho	PVC, blando
Pieza facial	PVC, blando
Bolsa higiénica (desechable)	Polietileno
Ropa	Poliéster
Bolso transporte	Nylon recubierto de PVC

## ESPECIFICACIONES PARA PEDIDO

Ref.	
A268008000	AmbuMan Basic iQF - incluye 1 Torso AmbuMan Basic con chaqueta de formación, bolso de transporte, 1 pieza facial y 25 bolsas higiénicas
A268009000	AmbuMan Basic iQF 4 Pack - incluye 4 Torsos del AmbuMan Basic con chaqueta de formación, bolso de transporte, 4 piezas faciales y 100 bolsas higiénicas
234 000 702	Bolsa higiénica Ambu, desechable (pack de 100)
234 000 703	Pieza facial Ambu (pack de 5)
234 000 725	Pieza facial Guedel Ambu

\* Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG, inc.



Indicador de compresión



Sistema Higiénico Único Ambu

# Ambu

Firma Ambu SL  
Calle Alcalá, 261-265,  
Edif 4 - 4º izq.  
28027, Madrid  
T +34 91 411 6830  
www.ambu.es  
ayuda@ambu.com



Ambu iQF Trainee