

# Ambu® Baby

## HOJA TÉCNICA

---

El Ambu Baby equivale a un bebé real de hasta un año de edad.

Su Sistema Higiénico Único de Ambu protege al estudiante y hace que la limpieza interna sea innecesaria.

Mira-escucha-siente. Como en la vida real, exhalación natural a través de la nariz y la boca que puede sentirse y oírse.

Su anatomía real le permite encontrar el punto de compresión correcto, y hace que la elevación del pecho/ abdomen sea evidente.

La cabeza puede girarse y extenderse, pero las vías respiratorias solamente se abren en la posición correcta. La distensión gástrica puede comprobarse visualmente sobre el estómago.



## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

---

- Sistema Higiénico Único Ambu
- Pulso Braquial
- Simulación de obstrucción de vías aéreas

# Ambu

## ESPECIFICACIONES


Peso de maniquí	1.8 kg
Peso de maniquí con bolsa de transporte	2.5 kg
Longitud de maniquí	40 cm
Cabeza	PVC rígido
Piel cara, torso, brazos y piernas	PVC blando
Bolsa de Cabeza	Polietileno

## ESPECIFICACIONES PARA PEDIDO

Ref.	Descripción
A 256 001 000	Ambu Baby, con 5 piezas faciales y 100 bolsas de cabeza. Suministrado en bolsa transporte semirígida.
256 000 702	Set de 100 bolsas de cabeza
256 000 703	Set de 5 piezas faciales



**Ambu Baby con su bolsa de transporte y contenido**

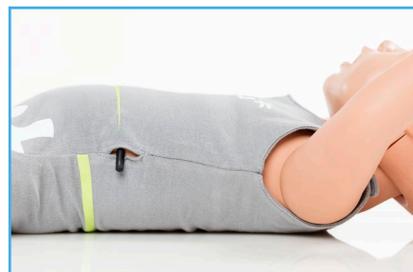

**Simulador obstrucción vía aérea**



**Bomba simulador pulso braquial**

# Ambu

### Firma Ambu SL

Calle Alcalá, 261 - 265 Edif 4 - 4º izq.  
28027, Madrid  
T +34 91 411 6830  
www.ambu.es  
ayuda@ambu.com