

# AmbuMan® SAM

## HOJA TÉCNICA

AmbuMan SAM es un muñeco de formación económico, con todas las funciones de Mira-Escucha-Siente conocidas y solicitadas de Ambu. Incorpora un sistema higiénico exclusivo y patentado que permite la formación con una pieza facial y una bolsa para la cabeza.

En especial, la forma detallada del torso, con sus referencias anatómicas, permite a los estudiantes aprender el algoritmo completo de la reanimación cardiopulmonar básica, que incluye el uso de desfibriladores externos (DEA) automatizados y la colocación de las almohadillas.

### Vía respiratoria abierta

La vía respiratoria se abre únicamente cuando la cabeza está inclinada: hay una resistencia de la vía respiratoria y una elevación del tórax realistas.

### Sistema higiénico

AmbuMan SAM tiene el mismo sistema higiénico exclusivo que AmbuMan Basic, con bolsas para la cabeza desechables y piezas faciales lavables.

### Bolsa compacta

La cabeza del AmbuMan SAM se puede meter dentro de los muñecos, de modo que todo se puede introducir en una sola bolsa pequeña.



## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Formación con DEA**

AmbuMan SAM tiene un diseño con torso cerrado y sirve para la formación sobre la colocación de las almohadillas del desfibrilador externo automatizado, como si se tratase de una persona.

- **Muñeco compacto**

AmbuMan SAM es un muñeco ligero que puede transportarse y almacenarse fácilmente.

- **Características prácticas**

El concepto de Mira-Escucha-Siente de Ambu proporciona a la persona que se está formando una percepción muy real de la ventilación. El indicador de compresión confirma la profundidad correcta de la compresión.

# Ambu

## ESPECIFICACIONES

Producto	Material
Peso	4.5 kg
Longitud	45 cm
Anchura	37 cm
Altura	25 cm
Volumen máx. insuf.	1.8 l.
Profundidad máx. compresión	7.5 cm
Temperatura de almacenamiento	-20 °C to +70 °C

## ESPECIFICACIONES PARA PEDIDO


Ref.	Descripción
A268 003 000	AmbuMan SAM con 25 bolsas para la cabeza y 1 pieza facial, suministrado en una bolsa de transporte blanda.

Accesorios	
234 000 702	Bolsa para la cabeza (suministrada en set de 100)
234 000 703	Pieza facial (suministrada en set de 5)



Almacenamiento compacto

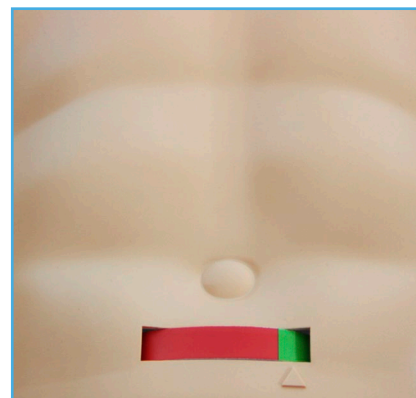

Indicador de profundidad de compresión



Colocación de las almohadillas del desfibrilador

# Ambu

### Firma Ambu SL

Calle Alcalá, 261 - 265 Edif 4 - 4º izq.  
28027, Madrid  
T +34 91 411 6830  
www.ambu.es  
ayuda@ambu.com