




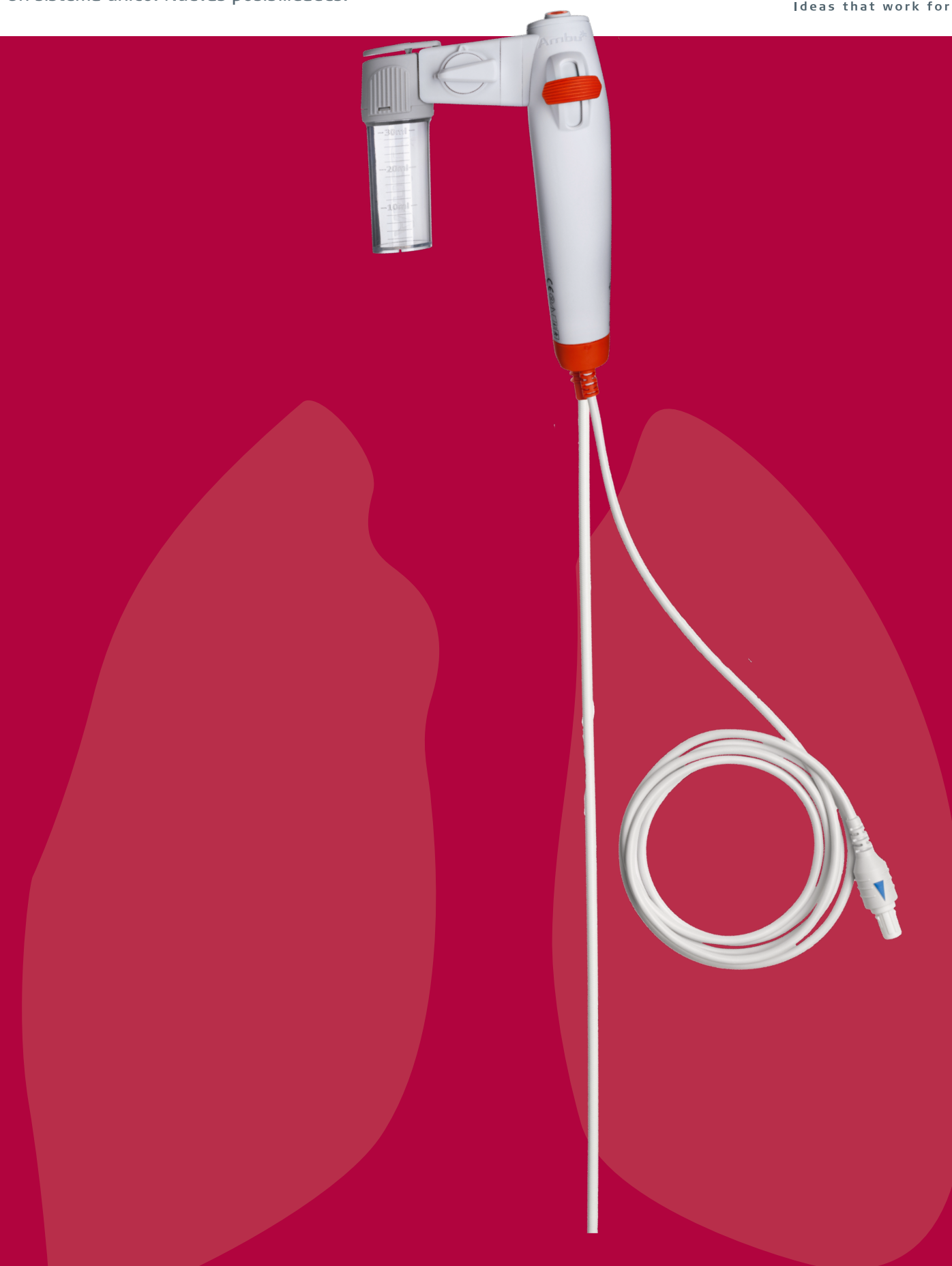


Especificaciones para pedido

Ref.	Descripción	Especificaciones	Cantidad
Sistema aScope™ 4 Broncho			
 478 001 000	aScope™ 4 Broncho Large 5.8/2.8	Ø DE: 5.8 mm Ø DI: 2.8 mm Tubo ET: ≥ 7	5
 477 001 000	aScope™ 4 Broncho Regular 5.0/2.2	Ø DE: 5 mm Ø DI: 2.2 mm Tubo ET: ≥ 6 Tubo DL: ≥ 41	5
 476 001 000	aScope™ 4 Broncho Slim 3.8/1.2	Ø DE: 3.8 mm Ø DI: 1.2 mm Tubo ET: ≥ 5 Tubo DL: ≥ 37	5
Monitor Ambu® aView™			
 405 002 000	Ambu® aView™	Monitor portátil con pantalla táctil	1
aScope BronchoSampler™			
 480200000	aScope BronchoSampler	Sistema de toma de muestras	5
 480300000	aScope BronchoSampler SC	Contenedor de la muestra	10



Confianza en la seguridad del paciente

Mejora la seguridad del paciente

Los broncoscopios reutilizables son difíciles de limpiar y esterilizar, como consecuencia de los largos y estrechos lúmenes, además de la fragilidad de sus materiales. En los broncoscopios reutilizables, incluso el más riguroso de los procedimientos de limpieza no garantiza la completa eliminación de la biopelícula. Por fin, el riesgo de contaminación cruzada asociado a los dispositivos reutilizables puede ser eliminado gracias a la gama de broncoscopios estériles de un solo uso - Ambu aScope 4 Broncho. Tan fácil como utilizarlo una única vez y desecharlo posteriormente. El acceso inmediato al aScope 4 Broncho elimina también los riesgos asociados de no tener un broncoscopio disponible en el momento preciso.

Coste efectividad

La esterilidad, portabilidad e inmediatez del aScope 4 Broncho aporta ventajas económicas frente al broncoscopio convencional. Se evitan los costes asociados del reprocesamiento y de las reparaciones, dispone de tres tamaños para un único monitor, lo puede mover una única persona, se evitan los elevados costes de una posible contaminación cruzada y lo más importante, es 100% seguro para el paciente.

Los elevados ángulos de flexión y el movimiento preciso de la punta hacen la navegación más fácil.



Broncoscopia de alta calidad

Facilita las intubaciones y las broncoscopias

aScope 4 Broncho funciona con un monitor portátil, Ambu® aView™, con pantalla táctil, resolución máx. de 800*480, posibilidad de zoom de imagen con tres tamaños de imagen posibles: 480X480, 560X480 y 640X480, salida de video a monitor externo, posibilidad de grabación de imágenes y videos con conexión USB que permita la extracción de las mismas y con una capacidad de almacenamiento de la memoria de 8GB.

Muy práctico

Además, incluye un anclaje para colocarlo en un portasueros, actualización de software rápida con la descarga de un archivo facilitado por nosotros de manera gratuita, mínimo de 3h de autonomía de la batería e indicador de la batería restante, operatividad instantánea, escalas de temperatura y color.



Circuito cerrado para la obtención de muestras con aScope™

Proceso de muestreo simplificado

El aScope BronchoSampler es un sistema único y una solución totalmente integrada solo para aScope™ 4 Broncho.

Está especialmente diseñado para mejorar la eficiencia del flujo de trabajo, al permitir que un solo usuario realice fácilmente, desde el ensamblaje hasta la obtención de muestra, un muestreo broncoscópico en los procedimientos de BAL o BW.


El aScope BronchoSampler también presenta una llave que permite cambiar entre succión y muestreo sin necesidad de usar el interruptor de tubo de succión.

Menos muestras perdidas o contaminadas

Al ser un sistema de circuito cerrado estéril y de un solo uso, aScope BronchoSampler™ reduce el riesgo de pérdida de muestra y garantiza la calidad de principio a fin. Al minimizar el riesgo de contaminación o exposición de la muestra, el aScope BronchoSampler™ proporciona diagnósticos precisos y garantiza la seguridad del paciente y del usuario.

Sistema innovador e integrado

Solución de muestreo diseñada específicamente para aScope™ 4 Broncho, siempre disponible y con todos los componentes necesarios para el muestreo en procedimientos de BAL y BW.

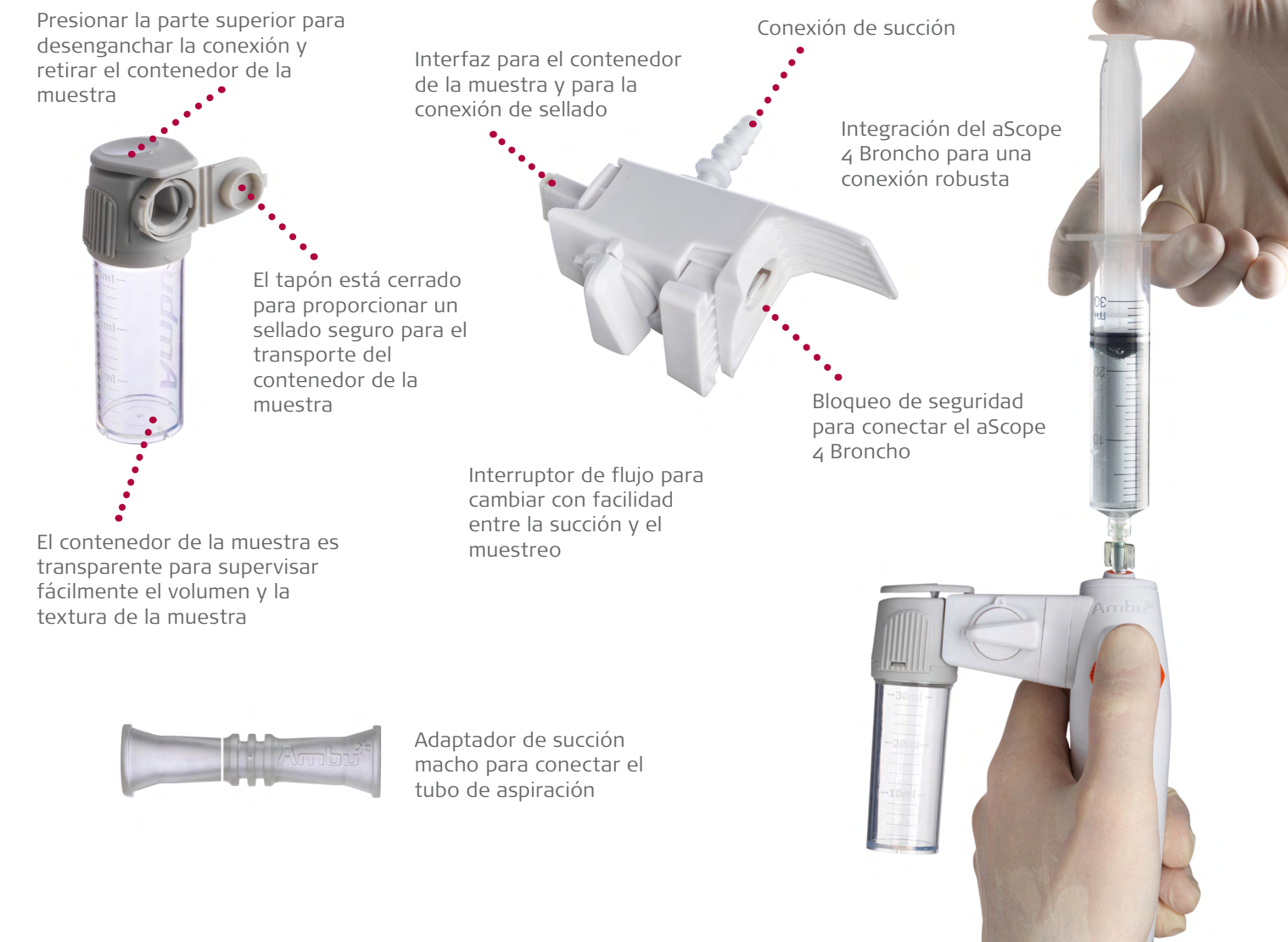

● aScope 4 Broncho Slim 3.8/1.2
Flexión: 180/180
Ref. 476 001 000

● aScope 4 Broncho Regular 5.0/2.2
Flexión: 180/180
Ref. 477 001 000

● aScope 4 Broncho Large 5.8/2.8
Flexión: 180/160
Ref. 478 001 000

Tres tamaños distintos con un mismo sistema y sin costes adicionales.