

Ambu® IV Trainer

HOJA TÉCNICA

Real hasta el más mínimo detalle. El IV Trainer esta preparado para practicar la inserción de cánulas y catéteres, infusión de fluidos, inyección de medicación, muestras de sangre y medición del pulso.


La piel y las venas sustituibles están hechas de látex natural, lo que facilita el cierre de orificios después de la penetración, aumentando el tiempo de vida del brazo.

La muñeca desplazable y el brazo giratorio garantizan una práctica absolutamente real, especialmente cuando se coloca un catéter en el dorso de la mano.

El recipiente de fluidos está incorporado al brazo de prácticas. El sistema de válvulas reduce la formación de bolsas de aire en los vasos sanguíneos.

El Kit de transporte es multiservicios tanto como alfombra lavable, como kit protector.

El panel indicador representa cada vaso sanguíneo, con una autorregulación inmediata si por ejemplo una infusión es correcta.

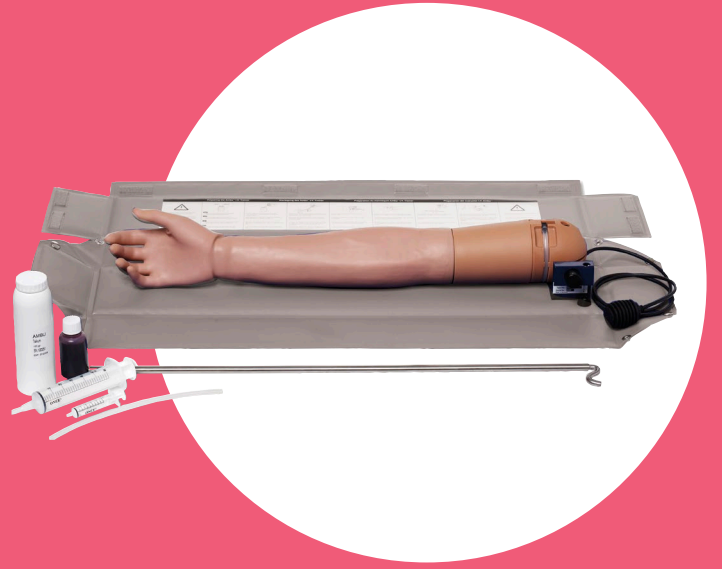

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Preparado para practicar la inserción de cánulas, catéteres, infusión de fluidos, inyección de medicación, muestras de sangre y medición del pulso
- Muñeca desplazable y brazo giratorio que garantizan una práctica real

Ambu

DATOS TÉCNICOS

Producto	Dimensión
Dimensiones del brazo (L)	68 cm
Dimensiones dek Kit	75 x 75 x 11 cm
Peso	3,0 kg
Capacidad del recipiente	260 ml

MATERIALES

Producto	Material
Piel	Latex Natural
Mano y brazo	PVC duro
Venas y arterias	Latex Natural
Indicador	Silicona
Bolsa	Nylon

ESPECIFICACIONES PARA PEDIDO

Ref.	Descripción
255 001 000	Ambu IV Trainer completo con el soporte de infusión, concentrado colorante rojo, polvo de talco y jeringas de 5 ml & 50 ml. Entregado en un kit/ base lavable

Accesorios

255 000 703	Jeringa de 50 ml. para llenado
255 000 702	Jeringa de 5 ml. para colorante rojo
255 000 701	Frasco de polvos de talco
255 000 704	Concentrado de colorante rojo

Piezas de Repuesto

490 006 600	Etiqueta de instrucciones, vinilo para el kit tipo maletín
255 000 513	Tubo de llenado, 12 cm
255 000 506	Remaches de plástico, grupo de tres
255 000 517	Piel de látex
255 000 502	Fuelle pulsátil con conector de tubo
255 000 503	Globo pulsátil con tapa protectora
255 000 519	Acolchado de nylon de espuma para el pulso
255 000 522	Brazo superior, completo
255 000 521	Estuche tipo maletín/esterilla de entrenamiento
255 000 504	Tubo de rebose, 25 cm
255 000 501	Grupo de tubos para venas y arterias



Brazo giratorio.



Accesorios.

Ambu

Firma Ambu SL

Calle Alcalá, 261 - 265 Edif 4 - 4º izq.
28027, Madrid
T +34 91 411 6830
www.ambu.es
ayuda@ambu.com