

HOJA TÉCNICA

AuraGain es la nueva generación de Mascarilla Laríngea de Ambu integrando acceso gástrico y posibilidad de intubar en un dispositivo con curvatura anatómica que facilita una inserción segura y rápida para alcanzar una vía aérea segura.

Posicionamiento Rápido

La curvatura anatómica original está pre-formada para seguir la anatomía de la vía aérea humana, y asegurar un posicionamiento rápido.

Alta Presión de Sellado

El manguito fino y suave garantiza unas altas presiones de sellado - hasta 40 cm H₂O.*

Control Gástrico

El canal de acceso gástrico integrado está diseñado con un diseño de baja fricción interna para facilitar un posicionamiento sencillo del tubo gástrico.

Introducir un tubo gástrico por el dispositivo para llegar al estómago del paciente, y así manejar el contenido gástrico pasivo y activo, y prevenir inflado gástrico.

Capacidad Integrada de Intubación

AuraGain ofrece la característica extra de intubar. De este modo, en caso de VAD no Prevista, o "No intubación - No Ventilación" (CI-CV) puede ser utilizada para posicionar un TE estándar asistido por un Videoscopio como el Ambu aScope.

Versatilidad Completa

Posicionamiento rápido, altas presiones de sellado, acceso gástrico, y la capacidad de intubación, hacen de AuraGain la opción de mascarilla laríngea obvia y segura para cualquier procedimiento donde el uso de una mascarilla laríngea este indicado.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Canal gástrico integrado de amplio tamaño
- Curvatura anatómica para asegurar una inserción fácil
- Posibilidad de intubación con TE estándar
- Bloque mordedor que evita oclusiones ante mordida del paciente
- El balón piloto muestra la talla y proporciona una indicación táctil del grado de inflado
- Marcas de navegación para uso de FBO o VD
- Compatible con Resonancia Magnética (RM)
- Sin Látex/Sin Ftalatos

ESPECIFICACIONES

	Pediátrico				Adulto			
Talla Mascarilla	#1	#1½	#2	#2½	#3	#4	#5	#6
Color en Envase	●	●	●	●	●	●	●	●
Peso del paciente	< 5 kg	5 - 10 kg	10 - 20 kg	20 - 30 kg	30 - 50 kg	50 - 70 kg	70 - 100 kg	> 100 kg
Volúmen máx. de inflado del manguito	4 ml	7 ml	10 ml	14 ml	20 ml	30 ml	40 ml	50 ml
Máx. presión en manguito	60 cm H ₂ O							
Conector Aéreo	15 mm ISO 5356-1							
D.I. mín. tubo	6,6 mm	7,2 mm	9,0 mm	10,2 mm	11,0 mm	12,7 mm	12,9 mm	12,9 mm
Válvula de inflado	Cono Luer ISO 594-1							
Temperatura de almacenaje	+10 °C - +25 °C							
Peso	14 g	18 g	25 g	40 g	45 g	63 g	86 g	88 g
Volúmen interno de recorrido de ventilación	3,3 ml	4,4 ml	10,2 ml	18,3 ml	17 ml	25 ml	33 ml	33 ml
Presión de goteo	0,0 cm H ₂ O at 15 l/min	0,0 cm H ₂ O at 15 l/min	0,1 cm H ₂ O at 30 l/min	0,1 cm H ₂ O at 30 l/min	< 0,1 cm H ₂ O at 60 l/min	< 0,1 cm H ₂ O at 60 l/min	0,1 cm H ₂ O at 60 l/min	< 0,0 cm H ₂ O at 60 l/min
Min. hueco interdental	11,6 mm	13,2 mm	16,2 mm	18,5 mm	21,0 mm	24,0 mm	25,9 mm	26,6 mm
Recorrido interno	9,4 cm	11,0 cm	12,7 cm	15,6 cm	14,2 cm	16,2 cm	19,0 cm	19,0 cm

Para Intubación

Máx. TE	3,5	4,0	5,0	5,5	6,5	7,5	8,0	8,0
---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Para Acceso Gástrico

Máx. Tubo Gástrico	6 FR	8 FR	10 FR	10 FR	16 FR	16 FR	16 FR	16FR
--------------------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	------

La mascarilla de Ambu AuraGain está desarrollada conforme la Directiva del Consejo 93/42/EEC relativa a productos médicos.

MATERIALES

Producto	Ftalatos	Material
Tubo vía aérea	No	PVC
Manguito	No	PVC
Conector aéreo	No	PCTG
Balón piloto	No	PVC
Válvula inflado	No	PVC/Silicona
Tubo Balón Piloto	No	PVC
Tubo Gástrico	No	PVC

Embalaje	Cantidad	Material
Bolsa	1	Tyvek®/PET/PE
Caja	10	Cartón

La Mascarilla Laríngea Ambu AuraGain está fabricada sin Látex.

Caducidad

36 meses

ESPECIFICACIONES PARA PEDIDO

Referencia	Tamaño	Tipo
408 100 000	1	Mascarilla Laríngea Desechable - Acceso Gástrico + Intubación
408 150 000	1 ½	Mascarilla Laríngea Desechable - Acceso Gástrico + Intubación
408 200 000	2	Mascarilla Laríngea Desechable - Acceso Gástrico + Intubación
408 250 000	2 ½	Mascarilla Laríngea Desechable - Acceso Gástrico + Intubación
408 300 000	3	Mascarilla Laríngea Desechable - Acceso Gástrico + Intubación
408 400 000	4	Mascarilla Laríngea Desechable - Acceso Gástrico + Intubación
408 500 000	5	Mascarilla Laríngea Desechable - Acceso Gástrico + Intubación
408 600 000	6	Mascarilla Laríngea Desechable - Acceso Gástrico + Intubación

Diseñada para intubación directa con TE estándar

Ambu


Firma Ambu SL

C. Santa Leonor, 65
Bloque B, Planta Baja, derecha
Madrid, 28037, Spain
T +34 91 411 6830
www.ambu.es
ayuda@ambu.com



Manguito de inflado suave para presiones de sellado altas

Curvatura anatómica original que asegura una fácil inserción

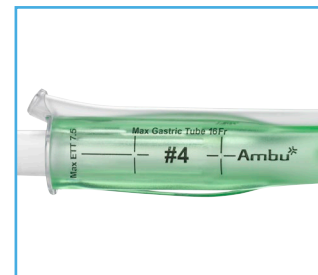

Marcas de profundidad en bloque mordedor blando para ayudar a un posicionamiento correcto.



Intubación endotraqueal directa con un videoscopio flexible y tubos endotraqueales estándar.



Nuestro innovador diseño, reduce el espacio muerto hasta un 39% en los tamaños 1 y 1 ½.

CE 0086

US: Rx only